



MANIJAS DE SUJECION PARA BANDAS Y TUBOS



OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante:

Fabrication Enterprises, INC.
PO Box1500, White Plains, New York 10602, USA.

Códigos M200

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93063 Emisión 1 05/2017

MANUAL DE USO


INTRODUCCION

Las manijas de sujeción **Care-Quip Argentina** han sido diseñadas para ayudar la utilización de bandas y tubos de látex en la ejercitación de los miembros. Aptas para el uso diario y ejercicios activos y pasivos. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad. Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros. Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.


COLOCACION

Passar la banda o tubo de látex por la cinta mochila según las imágenes de más abajo. Para mayor sujeción, cuando sea posible, pasar dos o más vueltas. Ajustar la hebilla para que apriete la banda o tubo de látex. Antes de utilizar comprobar que quede firme y no se sale.

BANDAS

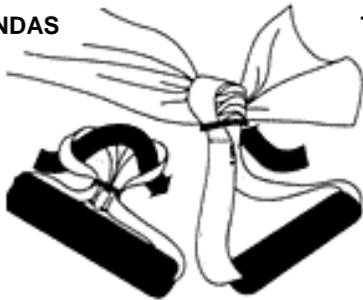

TUBOS

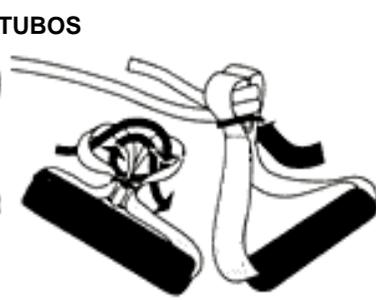


USOS

Los ejercicios se pueden realizar con o sin manijas de sujeción pero al utilizar las manijas se otorga al usuario mayor comodidad y facilidad para realizar los ejercicios.

Las bandas y tubos de látex se pueden utilizar para aumentar la fuerza, el alcance del movimiento y la coordinación; para estimular o inhibir músculos aislados o grupos de músculos; para vencer contracturas y mucho más. Cuando se cambia la dirección del movimiento se ejercitan diferentes músculos.

A continuación se mostraran diferentes ejercicios posibles. Para mayor variedad de ejercicios contactarse con un profesional.

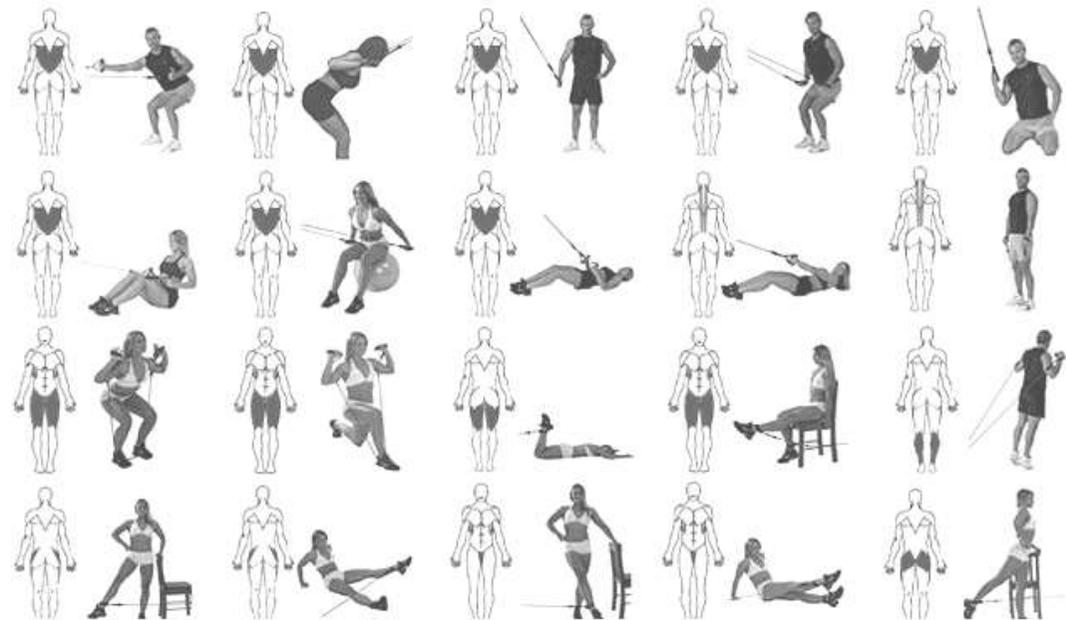

ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar las manijas de sujeción con las bandas y tubos de látex.

Utilizar las manijas de sujeción siempre según las indicaciones y tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y otras personas.

No todos los ejercicios son adecuados para todos los usuarios. Ante cualquier duda, no dude en contactarse con un profesional.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y húmedo, quitando la suciedad que pueda estar acumulada.

Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.

En caso de no utilizar por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: